

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863) 264-31-56; (863) 263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.



Снижение слуха было названо скрытой болезнью. Обычно, снижение слуха снижается так постепенно, что Вы можете осознать наличие проблемы, только когда снижение становится слишком сильным, чтобы его игнорировать.

MOVE - СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ

Несмотря на то, что это очевидное преувеличение, мы выбрали мегафон, для визуализации представления сложностей, которые возникают у слабослышащих людей при общении в семье, у друзей и коллег. Это известный факт, что эти проблемы являются основными в решении человека попробовать слуховой аппарат.

MOVE был разработан для людей, которым требуется слуховая система, способная сама адаптироваться к различным слуховым ситуациям. Основываясь на уникальной технологии Бернафона, использующей Стиль Жизни пациента, MOVE предлагает улучшенную систему обработки сигнала с полным набором адаптивных свойств, которые могут легко адаптироваться к индивидуальным особенностям пациента. С улучшенными инструментами настройки и широким выбором стилей и опций, Move является очень привлекательным аппаратом для большинства Ваших клиентов.

Первый шаг к решению проблемы -это ее оценка. Бернафон выпустил MOVE видеоклип, чтобы показать проблемы, которые вызывает снижение слуха при общении людей.

Технология, обращенная к жизни




Каждый человек, со сниженным слухом, имеет уникальные слуховые потребности, основанные на его или ее стиле жизни или степени потери слуха.

Успех любой слуховой системы зависит от того, насколько хорошо аппарат может компенсировать снижение слуха в слуховых ситуациях, где пациенту важнее всего слушать. Задача заключается в определении наиболее полезных для пациента настройках слухового аппарата. Технология Стиля Жизни Бернафон позволят сделать этот процесс очень простым.

ПОФИЛЬ СТИЛЯ ЖИЗНИ

Большинство слуховых систем основываются только на аудиограмме пациента. Профиль Стиля Жизни Бернафона дает инструменты настройки, которые позволяют внести индивидуальные слуховые потребности непосредственно в настройку слухового аппарата. Последовательное интервью в настроенной программе дает основу для быстрого определения и градации пяти наиболее важных слуховых потребностей пользователя слуховым аппаратом.

Профиль Стиля Жизни прямо определяет настройки по умолчанию для всех автоматических свойств Автоматической Программы слуховой системы MOVE. Хотя Автоматическая Программа может работать практически в любой повседневной слуховой ситуации, Профиль Стиля Жизни может предписать дополнительные слуховые программы, необходимые в специальных звуковых обстановках. С Профилем Стиля Жизни MOVE действительно настраивается под индивидуального пользователя.

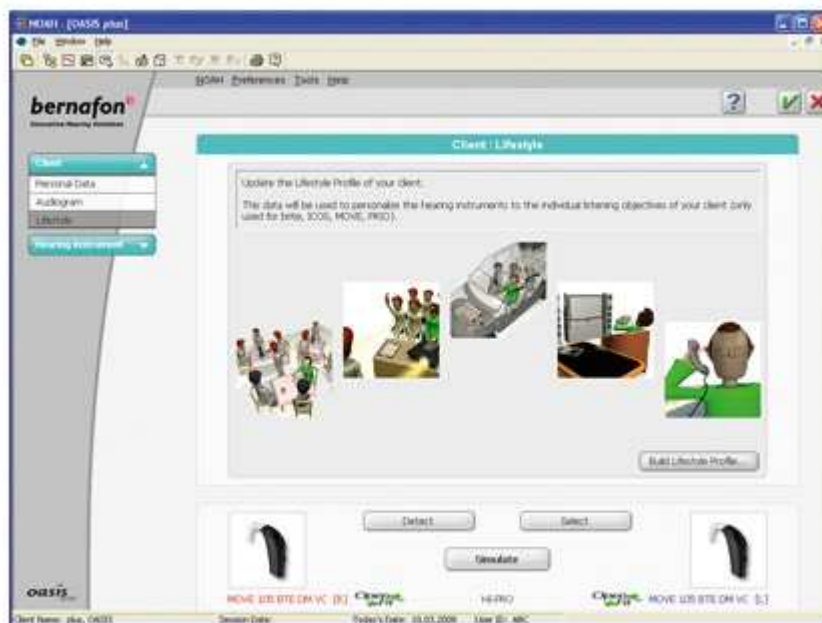

Менеджер Программ



МЕНЕДЖЕР ПРОГРАММ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОГДА-ТО РАНЬШЕ

Настройка MOVE является очень простой. В аппарате имеется три программы прослушивания, которые пользователь может легко активировать. Хотя Профиль Стиля Жизни автоматически предписывает программу прослушивания, Вы можете по желанию изменять ее.

Фокус на общение



Эффективная слуховая система должна иметь возможность одинаково хорошо адаптироваться к слуховым ситуациям дома, на работе и в местах отдыха и развлечения.



ПОЛНЫЙ НАБОР СТИЛЕЙ, ЦВЕТОВ И ОПЦИЙ

Семейство аппаратов MOVE состоит из 3-х заушных и 3-х внутриушных моделей, позволяющих корректировать любую форму снижения слуха. Все заушные слуховые аппараты могут быть снабжены как тонкой трубкой SPIRA flex, так и Крючком. Эта замена может быть легко произведена в офисе. MOVE имеет стандартную телефонную катушку и может легко управляться дистанционным управлением.

Полный набор стилей, цветов и опций

Множество стилей и опций регуляторов имеются в распоряжении, для индивидуализации MOVE под каждого клиента. MOVE предлагает полное семейство аппаратов от миниатюрных внутриканальных до мощных заушных аппаратов.

Все MOVE BTE (включая микро) имеют стандартную Телефонную катушку и могут легко управляться дистанционным управлением в опции. Привлекательная и комфортная тонкая трубка вместе со стандартным вкладышем имеются в распоряжении со SPIRA flex, также как традиционный Крючок для тех, кому требуется дополнительное усиление.

MOVE также предлагает большую палитру стилей, цветов и образцов.

Технические характеристики



MOVE высокотехнологичная цифровая слуховая система, разработанная при использовании уникальной технологии Бернафона Стиля Жизни. MOVE предлагает великолепную гибкость настройки с адаптивно перенастраивающейся обработкой сигнала, которая может быть оптимизирована под потребности клиента.

MOVE ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Feature \ Model	400	305	315	106	105	112
ВУЗД 90, пик дБ SPL (симул. уха.)	115	120	122	129	127	137
Макс. УЗД, дБ (симул. уха.)	45	52	54	63	63	76
Размер батареи	10	312	312	312	13	13
Адаптивная Направленность	4-полосная -	X	X	X	X	-
Кнопка переключения	-	X	X	X	X	X
РГ	-	-	X	-	X	X
Крючок / SPIRA ^{flex} Опция	-	-	-	X	X	X
T-Coil	-	opt.	opt.	X	X	X
Катушка дистанционного управления	opt.	opt.	opt.	X	X	X
Авто телефон	-	opt.	opt.	-	-	-
FM / DAI	-	-	-	DAI	X	X
Цветовая гамма	4	4	4	10	6	6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7-канальные цифровой процессор

Автоматическая программа с 9 режимами

Адаптивная направленность на 4 полосах

Адаптивная система подавления шума на 8 полосах

Менеджер тихих звуков

Адаптивная система подавления эффекта обратной связи

Менеджер обратной связи

Tracker Data Logging с предложениями по тонкой поднастройке

Музыка, Телефон или программа Аудитории

Индивидуально настраиваемые программы для DAI/FM и Телефооной катушки

Автоматическая программа Телефона для ITC's

Дистанционное управление в опции для всех моделей

Функция копии программ

Мультипрограммная настройка

СВОЙСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Профиль Стиля Жизни

9 режимов Чувствительность/ Адаптивность для Речи/Комфорта

3 независимо настраиваемые программы

Взаимозаменяемые опции SPIRA flex тонких трубок или Крючка для всех MOVE заушных аппаратов

Стандартная телефонная катушка для всех заушных MOVE

Широкая палитра продуктов:

микрозаушины

Компактная заушина

Мощная заушина

Индивидуально изготовленные аппараты

10 цветов и опций дизайна для заушин MOVE

4 опции цвета для внутриушных

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки

глюкометры массажеры

тонометры миостимуляторы

соляные лампы алкометры

физиотерапевтические аппараты