

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863) 264-31-56; (863) 263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.



Универсальный слуховой аппарат

Некоторые компании делают недорогие слуховые аппараты за счет сокращения их функций. В компании Unitron мы поступили иначе – мы создали недорогой слуховой аппарат, сделав наши фирменные функции доступными для всех. Ведь мы считаем, что хорошо слышать должны все.

SHINE:	SHINE+	SHINE
Полосы/каналы	8/4	4/2
Ручные программы*	До 4	До 3
Функции TriVantage		
Выделение речи LD	•	Вкл/Выкл
AntiShock™	•	•
Адаптивные направленные микрофоны	•	
Внутриушные аппараты	•	
Шумоподавление	•	Вкл/Выкл
Система подавления обратной связи	•	•
Снижение шума ветра	•	•
Data Logging	•	•
Индикатор разряженной батарейки	•	•
Индикатор оптимальной громкости	•	•

* В том числе специальная телефонная программа и прямой аудиовход.

Комфорт людей с ослабленным слухом и тех, кто о них заботится, – приоритет нашей работы. Мы постоянно стремимся упростить и облегчить жизнь людей и сделать эти решения максимально доступными для всех.

shine™


Мысли ярко. Мысли по-новому.



 **unitron™**
connect

Доказанный эффект доступен для всех

Выбирая подходящий слуховой аппарат, Ваши клиенты не должны ограничивать себя в его функциях. Shine™ – это доступный слуховой аппарат, который обеспечит комфортное восприятие звука и речи, сделает все звуки яркими и более естественными по сравнению с аппаратами того же ценового диапазона. Ведь Shine отличается не только соотношением цены и качества. Он дарит эмоции, а это – бесценно.

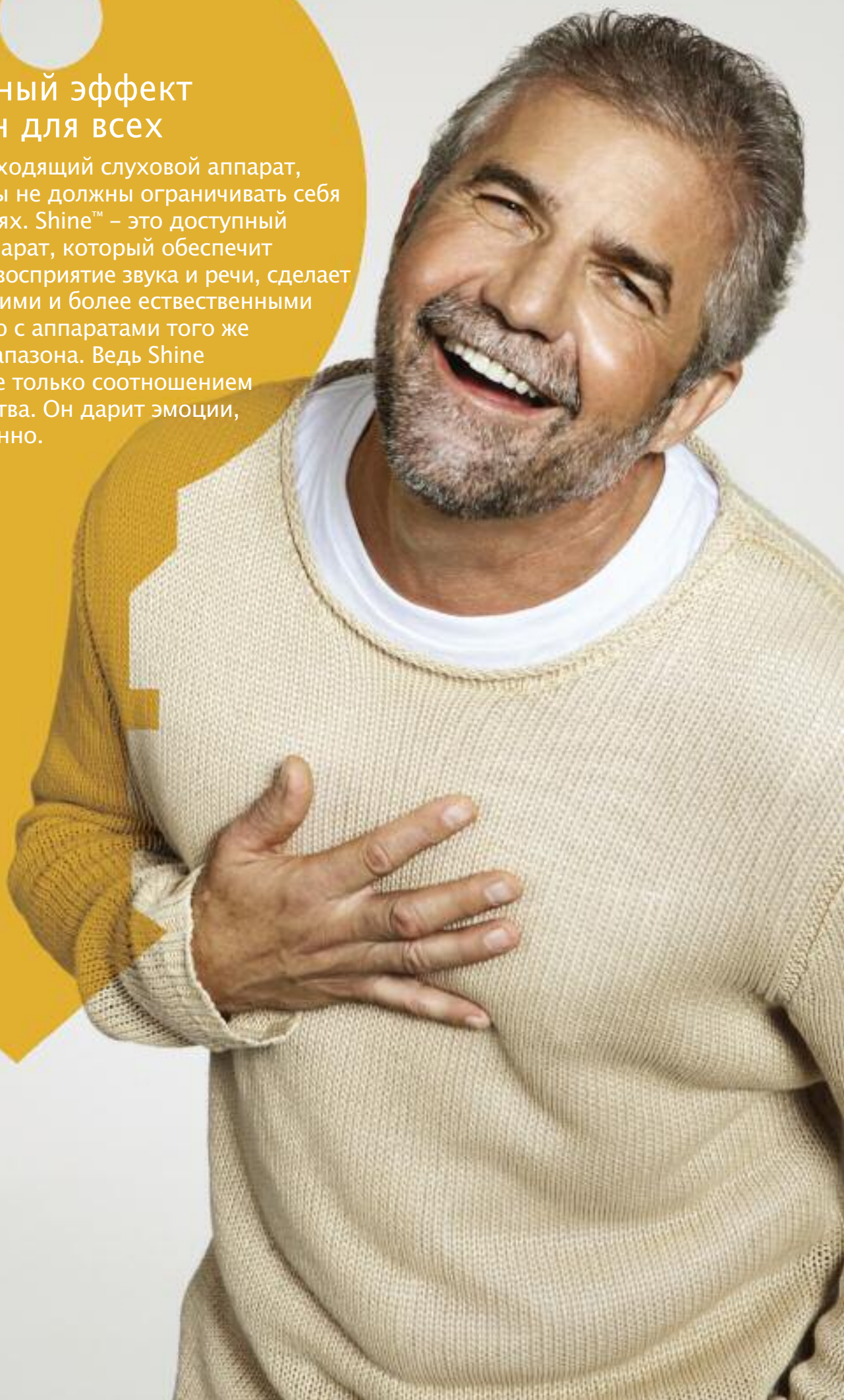


ВЕДЬ ВСЕ ХОТЯТ СИЯТЬ. SHINE™

Жить. Смеяться. Сиять.

В слуховых аппаратах Shine™ мы воплотили все основные свойства аппаратов этого ценового диапазона. Сначала мы подумали о базовых функциях слуховых аппаратов этой категории. И поставили перед собой цель полностью изменить представление о них. Результат – недорогой слуховой аппарат с уникальными свойствами и фирменными функциями Unitron, которые сделали по-настоящему комфортное восприятие звука доступным для всех.

Слышать больше. Тратить меньше. Блестяще.





Оригинальная технология, исключительная эффективность

В слуховых аппаратах Shine используются технологии, которые обычно есть только в аппаратах премиум-класса. Ни в каких других аппаратах этого ценового диапазона нет функции **выделения речи LD** и системы **AntiShock**. Мы не экономим и на микрофонной технологии. **Технология направленности** в аппаратах Shine+ решают главную проблему пользователей: комфортное восприятие речи в шумной обстановке[†].

[†] Источник: (Kochkin, MarkeTrak VIII, Hearing Journal, январь 2010 г.)



TriVantage: Первокласное сочетание функций

Shine – единственный слуховой аппарат этого ценового диапазона, снабженный тремя фирменными функциями компании Unitron. Мы называем их TriVantage ("тройное преимущество"), потому что они уже на протяжении долгого времени делают восприятие звуков нашими пользователями комфортным и эффективным.

Выделение речи LD

Эта функция чутко улавливает речь и усиливает прием только там, где это необходимо. Она повышает слышимость тихих звуков речи и при этом не усиливает посторонние громкие звуки. Результат – легкость восприятия речи там, где это важнее всего.

91%

пользователей находит речь более разборчивой при активации функции выделения речи LD^{††}

AntiShock™

Эта функция мгновенно определяет и подавляет внезапные неприятные звуки (например, хлопанье дверью), оставляя речь четкой и достаточно громкой. Результат – комфортное восприятие звуков без дополнительного напряжения слуха. Это самая современная настраиваемая технология подавления резких звуков.

87%

пользователей находит резкие звуки менее неприятными при включенной системе AntiShock^{††}

Адаптивные направленные микрофоны [Shine+]

Исследования показали, что направленные микрофоны значительно улучшают отношение сигнал/шум. Адаптивные направленные микрофоны улавливают и приглушают звуки из источников, находящихся сбоку и сзади, и улучшают понимание речи в шумной обстановке.

90%

пользователей предпочитают адаптивные направленные микрофоны при прослушивании речи на фоне шума^{††}


Поразительно эффективен. Удивительно доступен.

^{††} Источник: Внутренние испытания в Unitron.



Большее количество полос для точного формирования частотного ответа

8 полос аппаратов Shine+ позволяют формировать частотный ответ. Это позволит Вам лучше приспособлять слуховые аппараты к тем или иным особенностям нарушения слуха у Ваших клиентов.

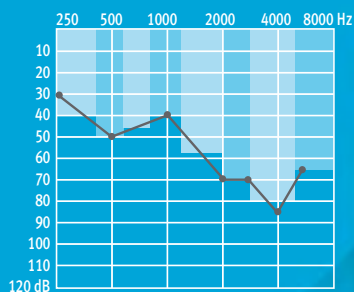


Подходят практически для любой степени потери слуха

Диапазон моделей слуховых аппаратов Shine от незаметных внутришных до мощных заушных позволяет компенсировать практически любое снижение слуха. Гибкость выбора обеспечивает эффективный подбор и возможность учесть индивидуальные предпочтения Ваших клиентов:

- Миниатюрный, изящный аппарат открытого протезирования Moda™ II
- Сверхмощные аппараты во всех моделях линейки
- Полный спектр заушных вариантов: модели с типом батареи 312, 13 и 675
- Полный ассортимент внутришных аппаратов для Shine+

MODA II

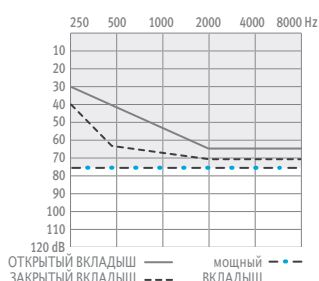

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип батареи: 312

Пиковая мощность/усиление (2 см3): 117/45

Тонкий звуковод, индукционная катушка, кнопка-переключатель

Опционально: рожок

BTE

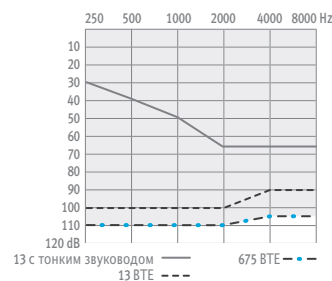

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип батареи: 13 & 675

Пиковая мощность/усиление (2 см3):
13 BTE 133/65 675 BTE 138/75

Рожок, индукционная катушка, кнопка-переключатель

Опционально: тонкий звуковод (BTE 13), DAI, набор средств для безопасной эксплуатации детских аппаратов

HS FS

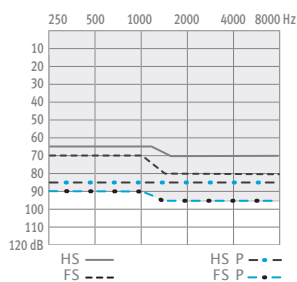


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 312 & 13

Пиковая мощность/усиление (2 см3):

HS 113/48 HS P 117/55
FS 115/50 FSP 122/60

CIC Canal

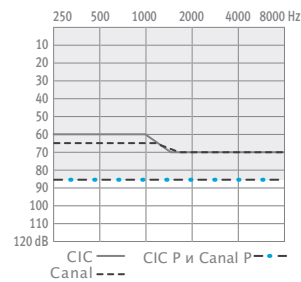

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 10A & 312

Пиковая мощность/усиление (2 см3):

CIC 112/40 CIC P 116/55
CANAL 113/48 CANAL P 117/55

Широкий выбор для разных потребностей